

**Het zelf aansluiten en in gebruik nemen van een
Tunstall Smart Hub personen alarmtoestel.**

**Neem toestel uit verpakking en steek de modulaire connector van de voeding
adapater in de aansluiting in alarmtoestel – (zie voorbeeld).**




Steek vervolgens de voeding adapter in een stopcontact.

**Wacht rustig af tot de LED's aan de voor en bovenzijde op het alarmtoestel
stoppen met knipperen en groen branden.**


**Nu is het toestel gereed en kunt u d.m.v de rode toets op het alarmtoestel
en/of de rode knop op de handzender een alarm oproep maken.**

**Een ongewenst alarm kunt u binnen een minuut afbreken door op de groene
toets te drukken.**

**Het toestel wordt volledig uitgeschakeld door de groene toets ingedrukt te
houden tot toestel meldt "" Verwijder Stroomkabel "" , waarna de voeding
adapter losgenomen kan worden uit toestel en stopcontact.**

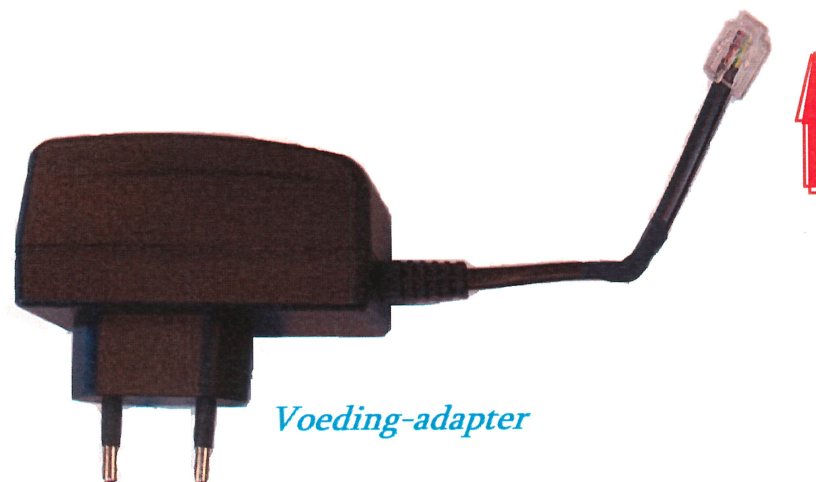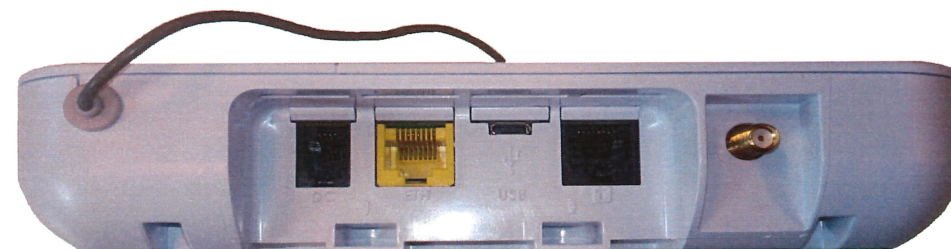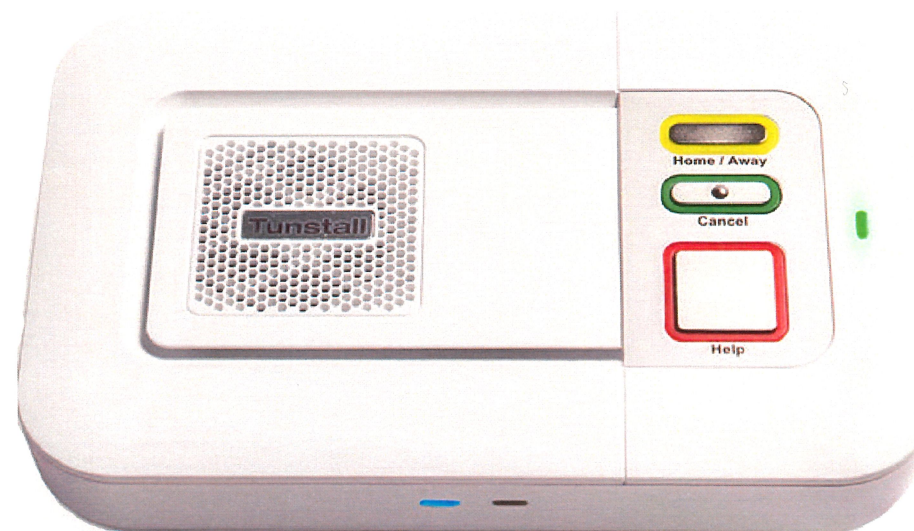

Voeding-adapater

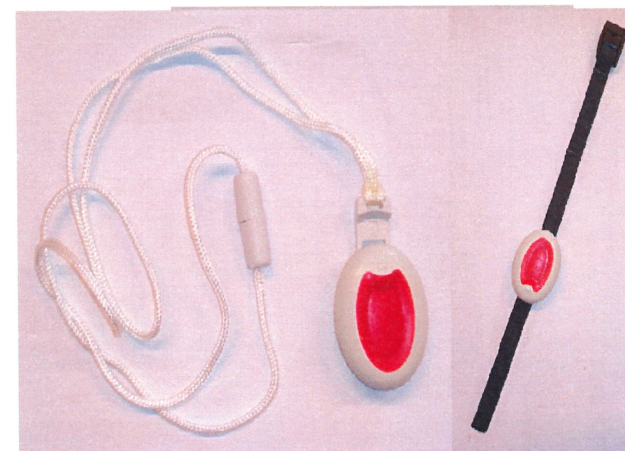

Handzender